

100-4T G3 Opsiyonel Aksesuarlar



Baş Bölümü uzatması
Mafsalı karbon fiber baş dayanağı, standart masa yüzeyinin görüntüleme ucuna bağlanır.



Kol Dayanağı
Kolayca yan raylara sökülüp takılabilir, aksesuar raylı klemp gereklidir.




Masa yüzeyi Kateter Tepsisi Uzatması

geniş, yalnızca masanın görüntüleme ucuna takılır. Uzatmanın destekleyebileceği maksimum ağırlık 9 Kg'dır (20 Lbs).



Periferel Uzatma

Karbon fiber uzatma sadece masanın görüntüleme ucuna takılır. 56 cm (22") genişliğindedir. Bu uzatma için maksimum ağırlık 11,4 Kg'dır (25 lbs).

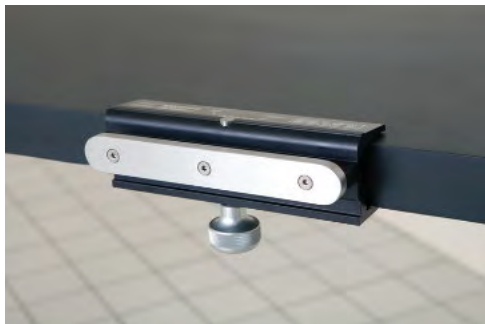

Aksesuar Raylı Klemp
Aksesuarları masa yüzeyine takmak içindir. Ray 15,2 cm (6") uzunluğunda, 95 mm (3/8") kalınlığında ve 3 cm (1-1/8") yüksekliğindedir.



Kol Dayanağı
Karbon fiber, omuzdan monte. Ped ve kayış içerir.




Radyasyon Kalkanı

Mafsalı, raya monteli. Masanın alt ucundaki yan rayına takılır, her iki taraftan ayarlanabilir. Mafsalı ek, kalkanın masanın şekline uymasını sağlar. Masa yüzeyi seviyesinin üzerindeki geçmeli üst kısım çıkarılabilir.



Ayak kumandası

Aspect 100-4T G3 masası için ayak kumandası. Ayak kumandası hareketleri: yukarı/aşağı ve Trendelenburg aşağı/yukarı.

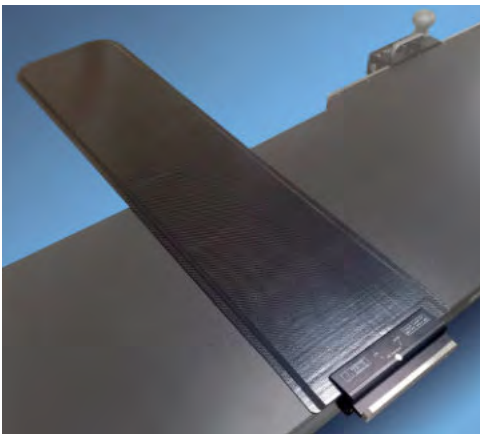

VAB Kol Dayanağı

Damar yolu erişim prosedürleri için karbon fiber, tek parça ekstra geniş kol dayanağı.



Masa yüzeyi Kateter Tepsisi Uzatması

61 cm (24") genişliğindedir. Sadece masa yüzeyinin kolon tarafı ucuna yakılır. Bu uzatmanın destekleyebileceği maksimum ağırlık 9 Kg'dır (20 Lbs).

Yan ray klemp

Döner, 1,6 cm (5/8 inç) çapa sahip dairesel sabitleme çubuğuna sahip aksesuarlar içindir.




Anestezi Siperi Tutucu

Esnek "çember" tarzı, opsiyonel olan döner yan klemp(gerekli) ile standart aksesuar raylarına veya doğrudan A100-2317 Baş bölümü Uzatmasına takılabilir. (Sağdaki fotoğraf).

100-4T G3 Özellikler

Masa hareketleri

- Uzunlamasına masa yüzeyi kayma: 81,3 cm (32").
- Enine masa yüzeyi kayma: 20,3 cm (8").
- Trendelenburg: $\pm 12^\circ$ Trendelenburg pozisyonunda iken otomatik seviyede kalma ve uzunlamasına kayma fonksiyonu kilitleme.
- Masa yüksekliği:
 - Masa yüzeyi pedsiz: 76 - 109 cm (30" - 43").
 - Masa yüzeyi pedi ile: 81 - 114 cm (32" - 45").

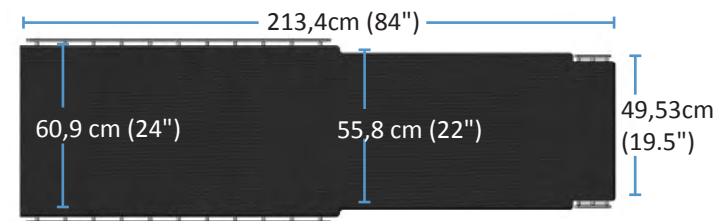

Masa yüzeyi yapısı

- Yüksek geçirgenliğe sahip fotoblok karbon fiber

Elektrik

- Elektrik güç gereksinimleri: 115 / 230VAC < 10amps
- Dahili bataryadan tam çalışma
- Durum göstergeli pil kapasitesi 14Ah
- 6 metre (20') güç kablosu

Garanti

- Üç yıl parça ve işçilik garantisi*

Standart aksesuarlar

- Masa yüzeyi Ped 5 cm kalınlığında, hafızalı köpük yapısı.
- Gezdirebilir El Kumandası, Raya Monteli
- Askılı el kumandası
- Hasta Emniyet Kemerleri (2)

Kapasite / Masa Ağırlığı

- Hasta ağırlık kapasitesi: 272 kg. (600 lbs) masa yüzeyi uzatmaları olmadan
- Hasta ağırlık kapasitesi: 226 kg. (500 lbs) masa yüzeyi uzatmaları ile
- Masa ağırlığı: 274 kg. (605 lbs)

Sertifikalar

- IEC 60601-1:2005 Ed.3+A1;C1:2014,
- IEC 60601-1-2 4th edition
- IEC 60601-2-46 Ed.2, IEC 62366 Ed 1.1
- AAMI ES60601-1:2005+A1
- CSA C22.2 #60601-1:2014 Ed.3

idi Image
Diagnostics
Inc.


Image Diagnostics, Inc. ürün özelliklerini bildirimde bulunmaksızın güncelleme hakkını saklı tutar.
*Detaylar için IDI Garanti Belgesi D000-498'e bakın.

Image Diagnostics, Inc. 310 Authority Drive Fitchburg, MA 01420 USA
(877) 304-5434 imagediagnostics.com

L100-2913B


100-4T G3

*Girişimsel/Endovasküler Görüntüleme Masası
Trendelenburg Pozisyonlu*

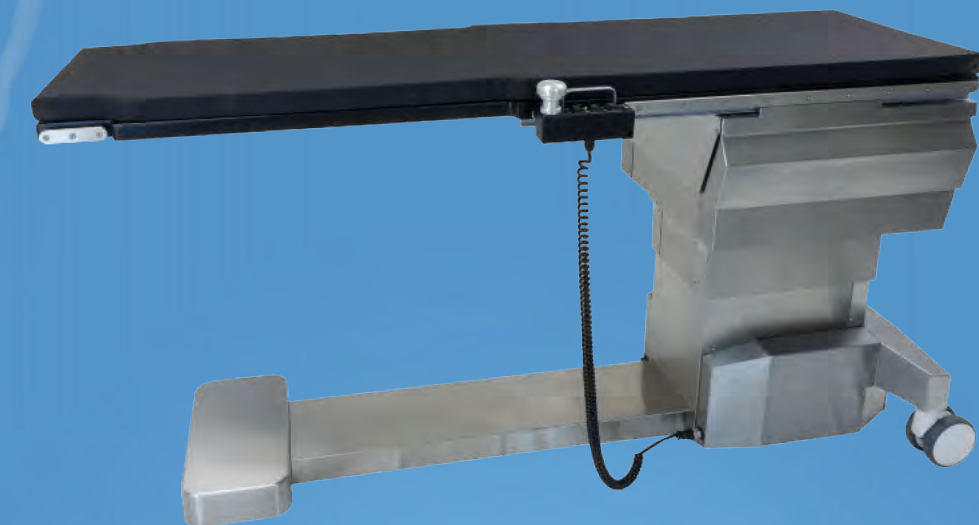

Akıllı Seçim:

- 272 kg (600 lbs) hasta kapasitesi - standart
- Toplam vücut kapsama alanı için 173 cm (68") görüntüleme alanı
- 5 güne kadar pil kullanımı
- Hidrolik yok - yağ sızıntısı yok
- Pnömatik yok - kompresör servisi yok
- Zahmetsiz kaydırma işlemi
- En düşük taban yüksekliği
- Üç yıl parça ve işçilik garantisi*

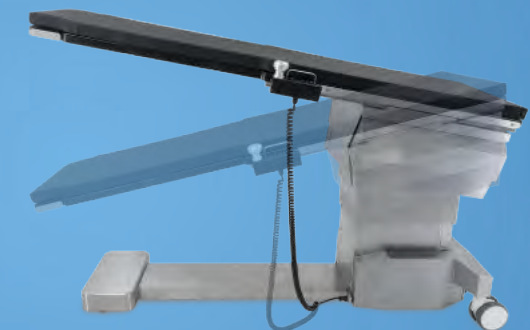

idi
Image **Diagnostics, Inc.**
Güvenlik, Sadelik, Kalite

100-4T G3

4 yöne manuel kayabilen trendelenburg pozisyonuna sahip masa operasyonel pozisyonlandırma sağlar

Image Diagnostics 100-4T G3, Aspect™ masa serisi arasında performans ve fiyat arasındaki ideal dengeyi temsil eder. Ameliyathane ve ofis bazlı laboratuvarlarda 100-4T G3, girişimsel ve vasküler prosedürler esnasında tercih edilen görüntüleme çözümüdür.

100-4T G3, son derece kompakt bir platformda 81 cm'lik (32") uzunlamasına kaydırma sunar. Daha küçük odalarda masa pozisyonlandırılması geliştirilirken, kapsamlı anatomik görüntüleme herhangi bir C-kolu hareketi olmadan kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Standart 213 cm'lik (84") yüzey, 173 cm'lik (68") görüntüleme alanı sağlar. Opsiyonel periferel uzatma ile gösterilen masa yüzeyi ile donatıldığında, görüntüleme alanı 203 cm'ye (80") yükselir - Artık en uzun hastalarda da tam vücut görüntüleme mümkündür.

Yüksek kaliteli karbon fiber masa yüzeyi ve 5 cm (2") kalınlığındaki masa yüzeyi pedi, yüksek x-ışını geçirgenliği sağlar.

Eksiksiz masa kontrolü parmaklarınızın ucunda

Kullanımı kolay tek bir kumanda kolunda birleştirilmiş kaydırma ve elektrikli fonksiyonlar
Kayma kontrolü ve diğer kontroller tek bir merkezden ayarlanmaktadır.



IDI'nin ilex55 video entegrasyon sistemi ile gösterilen 100-4T G3



Opsiyonel baş bölümü uzatması ile 100-4T masa


- Güvenlik ve İşlevsellik** - Kayma özelliğini kaybetmeden elektrikli fonksiyonlar kilitlenebilir. Kayma kontrolünün kazara serbest bırakılması, sezgisel el serbest bırakma tasarımı ile önlenir.
- Uzatmalar ve Görüntüleme** - Masanın baş ucundaki mini ray sistemi, opsiyonel olan baş bölümü, tepsi uzatmalarının ve aksesuarlarının saniyeler içinde takılmasına olanak sağlar.
- Tasarımın güvenilirliği ve sadeliği** - IDI, gelişmiş vasküler görüntüleme masalarında pazar lideridir. Uzun vadeli güvenilirlik, kapsamlı üç yıllık yedek parça ve işçilik garantimize yansır.

100-4T G3 Masa Hareketleri




100-4T G3 Masa Özellikleri

Opsiyonel baş uzatması ile gösterilen masa yüzeyi

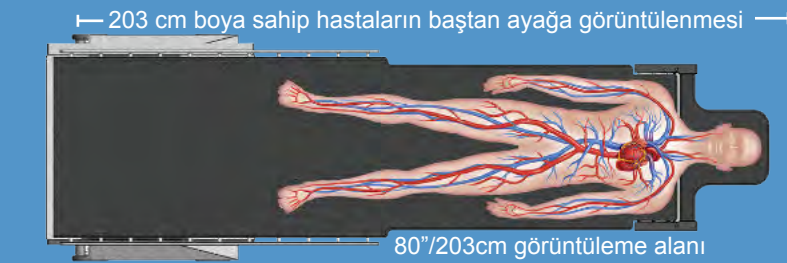

Opsiyonel periferel uzatma ile gösterilen masa yüzeyi

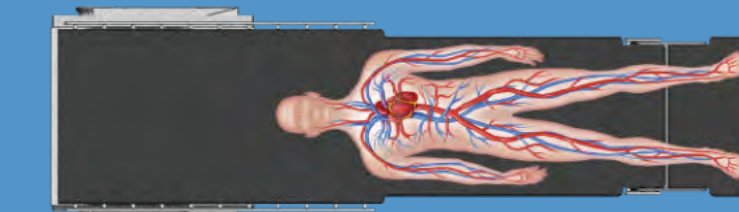

Çok geniş radyolüsen görüntüleme alanı. Maksimum hasta ve personel güvenliği için düşük AL eşdeğeri karbon fiber masa yüzeyi.



Kolay konumlandırma ve kablo yönetimi için, masa kontrolleri masa kaidesinin her iki tarafına da bağlanabilir.



Kolay taşıma ve konumlandırma için basit merkezi kilitleme sistemi.